


LABORATORIO DE APLICACIONES
ELECTRONICAS SRL

MT10
Timpanómetro
portátil



El impedanciómetro automático MT10 es rápido y fácil de usar, realizando mediciones objetivas que no se pueden lograr mediante una simple otoscopia

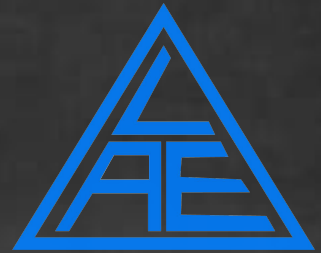


Distribuidor Argentina


Interacoustics


Screening fácil con el MT10

En los entornos sanitarios modernos es fundamental poder realizar pruebas rápidas y fiables.

El MT10 tiene un diseño que permite satisfacer estos requisitos, de una forma sencilla y rentable.

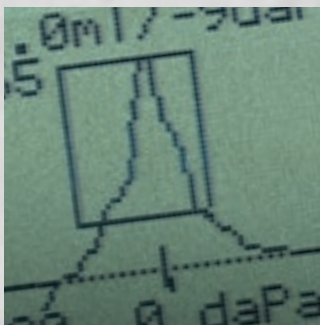

Un oído medio sano producirá un timpanograma fácilmente reconocible por su forma. El pico estaría dentro del recuadro de apto/referencia.

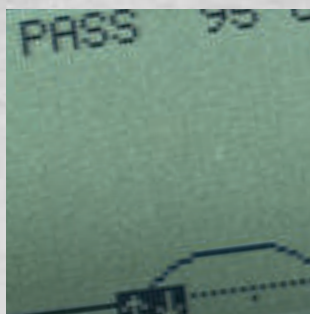

El reflejo acústico opcionalmente puede realizarse para respaldar y mejorar un diagnóstico. Se determina fácilmente el paso/referencia.

Timpanogramas, fáciles y rápidos

Los resultados se obtienen de forma rápida y sencilla, sin necesidad de que el paciente proporcione una respuesta. Esto resulta especialmente práctico en el caso de pacientes que sea complicado someter a pruebas p. ej. pacientes pediátricos.. Por ejemplo con esta unidad es posible detectar rápidamente y con gran sencillez la otitis media, una de las principales causas de las sorderas infantiles temporales o permanentes.

Uso clínico

El MT10 también es útil para diagnóstico clínico, ya que los timpanogramas y las respuestas de reflejo estapedial opcionales se registran con gran detalle. Con el MT10 podrá detectar Otitis media, tímpanos perforados, colesteomas y ciertos desórdenes neurológicos. Además, podrá verificar los tubos de timpanostomía y realizar seguimiento después del tratamiento médico.

Movilidad

- Ligero
- Dispositivo portátil
- Carga de datos en la propia unidad para la impresión
- Opcional; Maletín de transporte con impresora térmica y cable adaptador USB e infrarrojos para su integración con el PC.



Reflejo acústico ipsilateral

Es posible realizar hasta cuatro pruebas de reflejos por oído, con una selección de intensidad manual o automática. Las pruebas se realizan con el nivel de presión adecuado y las características de reflejo reales se muestran en la pantalla para que el operador pueda verlas e interpretarlas.

- 4 frecuencias (500, 1000, 2000, 4000 Hz)
- Búsqueda de umbral de nivel de dB sencillo o múltiple
- Detección automática del umbral


Memoria para 30 pacientes

El MT10 puede guardar en su memoria los resultados de las pruebas de hasta 30 pacientes. Esto permite realizar un cribado de un gran número de pacientes e imprimir los datos más adelante.







Con el MT10 es posible detectar rápidamente y con gran sencillez la otitis media

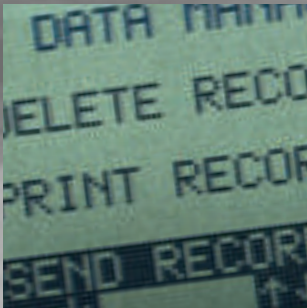

Fácil borrado, impresión o envío de registros al PC (requiere adaptador USB opcional para transferir o imprimir datos).

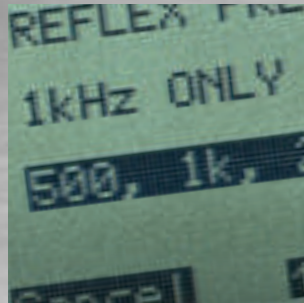

El MT10 dispone de 4 frecuencias para reflejos.

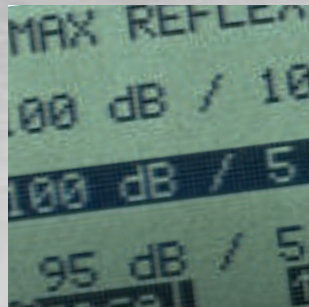

El MT10 dispone de 4 frecuencias para reflejos (85-100dB) (Opcional)

Integración en el ordenador

El MT10 se puede integrar con un ordenador con el software Diagnostic Suite Windows® para permitir la transferencia de datos timpanométricos al ordenador.

El programa de diagnóstico ofrece funciones como:

- Transferencia de datos timpanométricos
- Asistente para la impresión avanzada
- Elaboración de informes personalizados y combinados
- Página de informes avanzada
- Gestión de pacientes y sesiones
- Integración completa con bases de datos: Compatible con OtoAccess™ y Noah

MT10 puntos destacados


- -400 a +200 daPa
- Reflejos ipsilaterales (Opcional)
- Memoria de hasta 30 pacientes
- Rápido y fiable



Ejemplo de impresión del impresora térmica opcional

Opcional;
Maletín de transporte



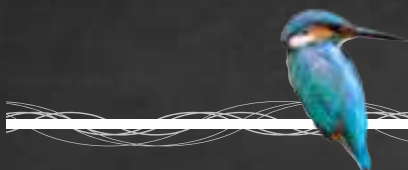

Interacoustics a/s

Interacoustics es un proveedor de soluciones de diagnóstico líder a nivel internacional en el campo de la evaluación de la audición y el equilibrio. Ayudamos a los audiólogos profesionales a lograr nuevos objetivos a través de desarrollos continuos y un enfoque constante en la integración y el valor del cliente directo.

Con usted en todo momento

Cuando adquiera equipos audiológicos de la marca Interacoustics, no solo se llevará un producto de gran calidad, sino que también contará con la ayuda de personal de soporte altamente cualificado y especializado. Trabajamos en más de 100 países de todo el mundo a través de una red de distribuidores y centros de asistencia técnica cuidadosamente seleccionados para garantizarle que dispondrá de una cobertura completa en cuanto a soporte y asistencia.

Especificaciones del producto

Consultar

Obtenga más información en
www.lae-audiologia.com

Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas SRL

Desde 1958 a su servicio

Paraná 425 - piso 11

Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel: 4373-1772 / 4374-1367 / 4371-6580

Email.: laesrl@speedy.com.ar

Vaya a la página web para explorar nuestra gama de productos completa



L.A.E. SRL



Interacoustics

PEA/OEA

Evaluación del equilibrio

Sistemas de adaptación

Analizadores del oído medio

Audiómetros